

HYUNDAI H350 AMBULANCE

ALLMED
SAVE A LIFE



**PRO-Z
KIT
TYPE-B**



سروش دیزل موبار

نماینده رسمی تولید
خودروهای تجاری
هیوندای موتورز کره در ایران



دارای استاندارد ملی ۴۳۷۴

آمبولانس هیوندای H350



www.allmed.ir
info@allmed.ir
+982156807410-12
@allmedco

HYUNDAI H350 AMBULANCE

ALLMED
SAVE A LIFE



با کیفیت ترین ون تولید داخل ، همزمان با عرضه در بازارهای جهانی



www.allmed.ir
info@allmed.ir
[+982156807410-12](tel:+982156807410-12)
[@allmedco](https://www.instagram.com/allmedco)

HYUNDAI H350 AMBULANCE

ALLMED
SAVE A LIFE



خودرو تولید داخل مورد تایید هیوندای موتورز کره


امکانات رفاهی و ایمنی مدرن

طراحی به روز کابین بیمار

تجهیزات پزشکی ویژه آمبولانس



www.allmed.ir
info@allmed.ir
+982156807410-12
@allmedco

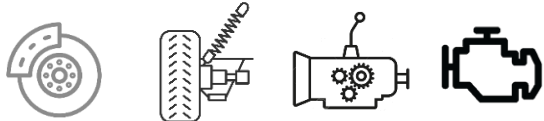	مشخصات فنی خودرو
	مشخصات آمبولانس
	تیریم داخلی و جانمایی تجهیزات
	سیستم الکترونیکی کابین بیمار و کنترلرها
	سیستم تهویه / سرمایش / گرمایش
	آلارم ، تجهیزات هشدار دهنده و علائم ظاهری آمبولانس
	تجهیزات پزشکی

HYUNDAI H350 AMBULANCE



موتور

حجم موتور: 2.5 L
نوع و مدل موتور: دیزل
حداکثر قدرت: 170 HP
متوسط مصرف سوخت: 8 L/100 km
سطح استاندارد آلایندگی: یورو 6
سیستم آلایندگی هماهنگ با سوخت دیزل کشور

ترمز

ترمز جلو:
دیسکی تهویه شونده
ترمز عقب:
دیسکی
ABS & EBD
(هر ۴ چرخ دیسکی)



مشخصات فنی خودرو - موتور / ترمز



www.allmed.ir
info@allmed.ir
+982156807410-12
@allmedco



HYUNDAI H350 AMBULANCE




گیربکس

دستی 6 سرعته (در مدل تک دیفرانسیل)



دیفرانسیل

دیفرانسیل عقب (تک دیفرانسیل) RWD

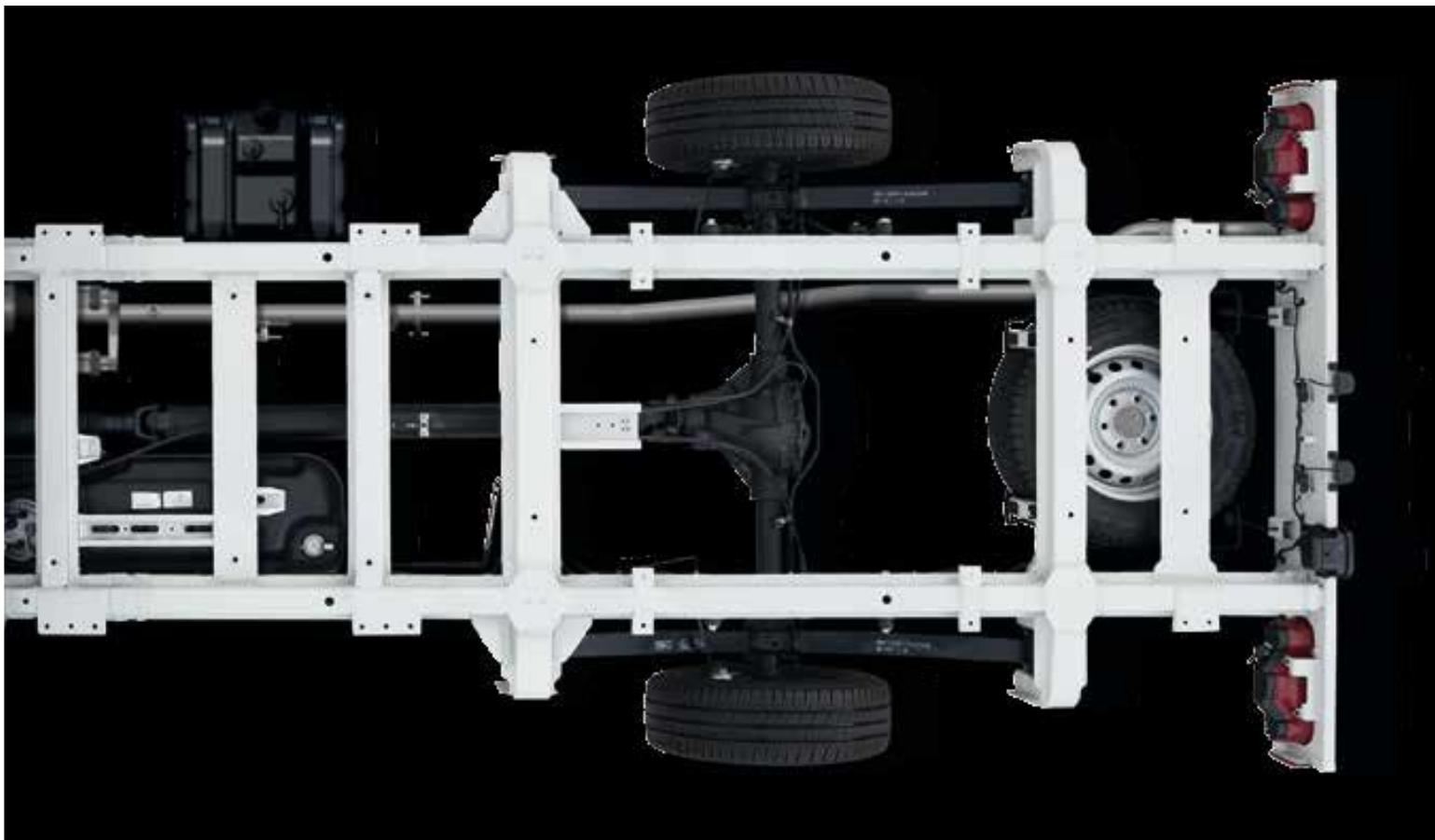

سیستم تعلیق

جلو مکفر سون / عقب فنر تخت پارابولیک



مشخصات فنی خودرو - سیستم انتقال قدرت و تعلیق

www.allmed.ir
info@allmed.ir
[+982156807410-12](tel:+982156807410-12)
[@allmedco](https://www.instagram.com/allmedco)



HYUNDAI H350 AMBULANCE




Front airbags for driver and passenger



4-wheel disc brakes



Roll Over Mitigation (ROM)

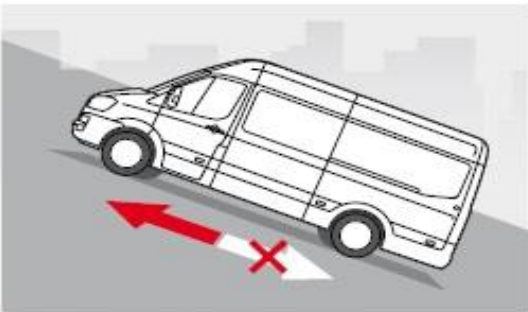

Hill Start Assist (HSA)



Emergency Stop Signal (ESS)



ایمنی :

- ایربگ راننده و سرنشین جلو
- قفل مرکزی
- روشنایی روز (DAY LIGHT)
- آینه نقطه کور جانبی
- سیستم ESS (توقف اضطراری)
- HSA(Hill Start assist)
- Rom (roll over mitigation)
- BODY CRASH TEST بر اساس استانداردهای اروپایی

مشخصات فنی خودرو - امکانات ایمنی و رفاهی



www.allmed.ir
info@allmed.ir
+982156807410-12
@allmedco






امکانات رفاهی

دوربین دنده عقب
مانیتور و سیستم صوتی
فرمان مولتی فانکشن
آینه های برقی
نمایشگر پشت آمپر و دیاگ اینترنال
....و



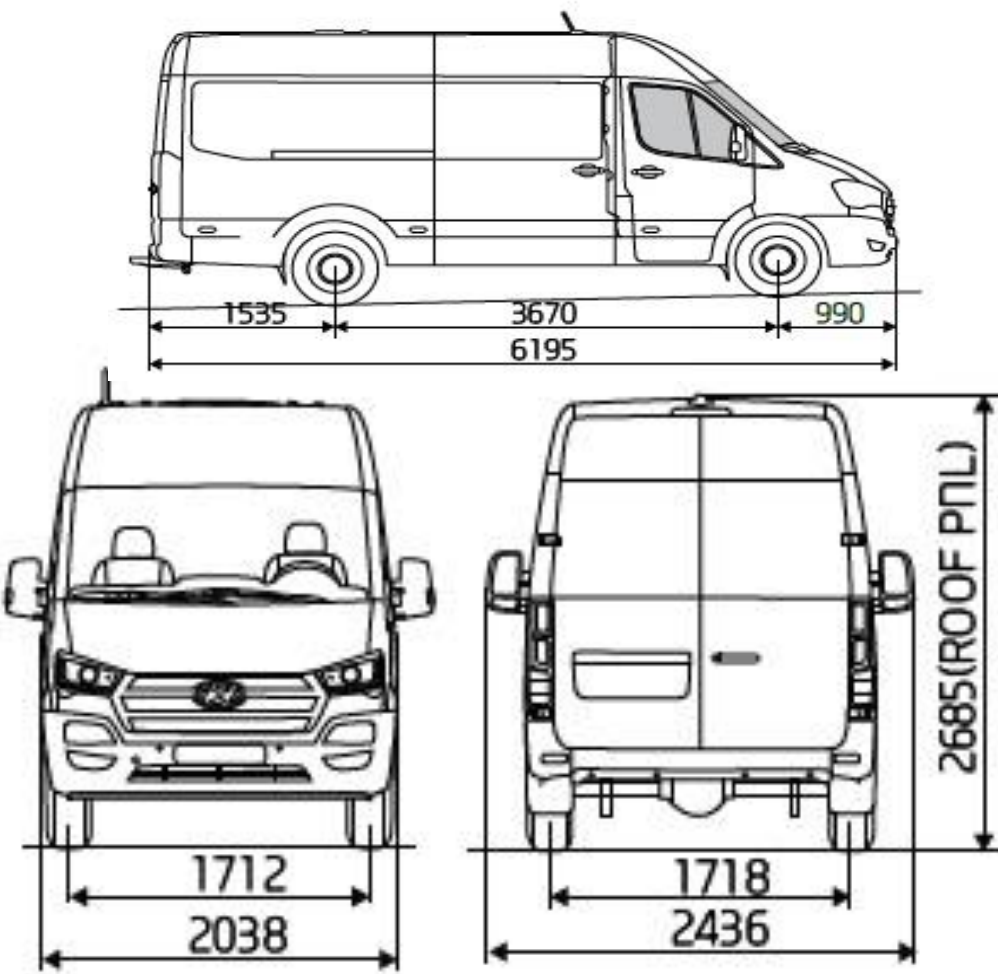

ابعاد خودرو

طول خودرو: ۶۱۹۵ میلیمتر
عرض خودرو: ۲۴۳۶ میلیمتر
ارتفاع خودرو: ۲۶۸۵ میلیمتر
ارتفاع آمبولانس: ۲۸۸۵ میلیمتر
(ارتفاع پس از اضافه کردن چراغ خطی، سیستم تهویه و کولر
روی سقف خودرو)

مشخصات اتاق

فاصله بین دو محور: بلند (long wheel base)
سقف بلند (High roof)
دارای یک درب کشویی (۴درب) ONE REAR DOOR
ارگونومی مناسب کابین راننده
شاسی از فولاد High Tensile

مشخصات فنی خودرو – ابعاد خودرو



www.allmed.ir
info@allmed.ir
+982156807410-12
@allmedco



HYUNDAI H350 AMBULANCE

ALLMED
SAVE A LIFE



مشخصات فنی خودرو - ابعاد خودرو



www.allmed.ir
info@allmed.ir
+982156807410-12
@allmedco






کانورژن TYPE B -Z PRO

مشخصات آمبولانس (کانورژن آمبولانس)



HYUNDAI H350 AMBULANCE

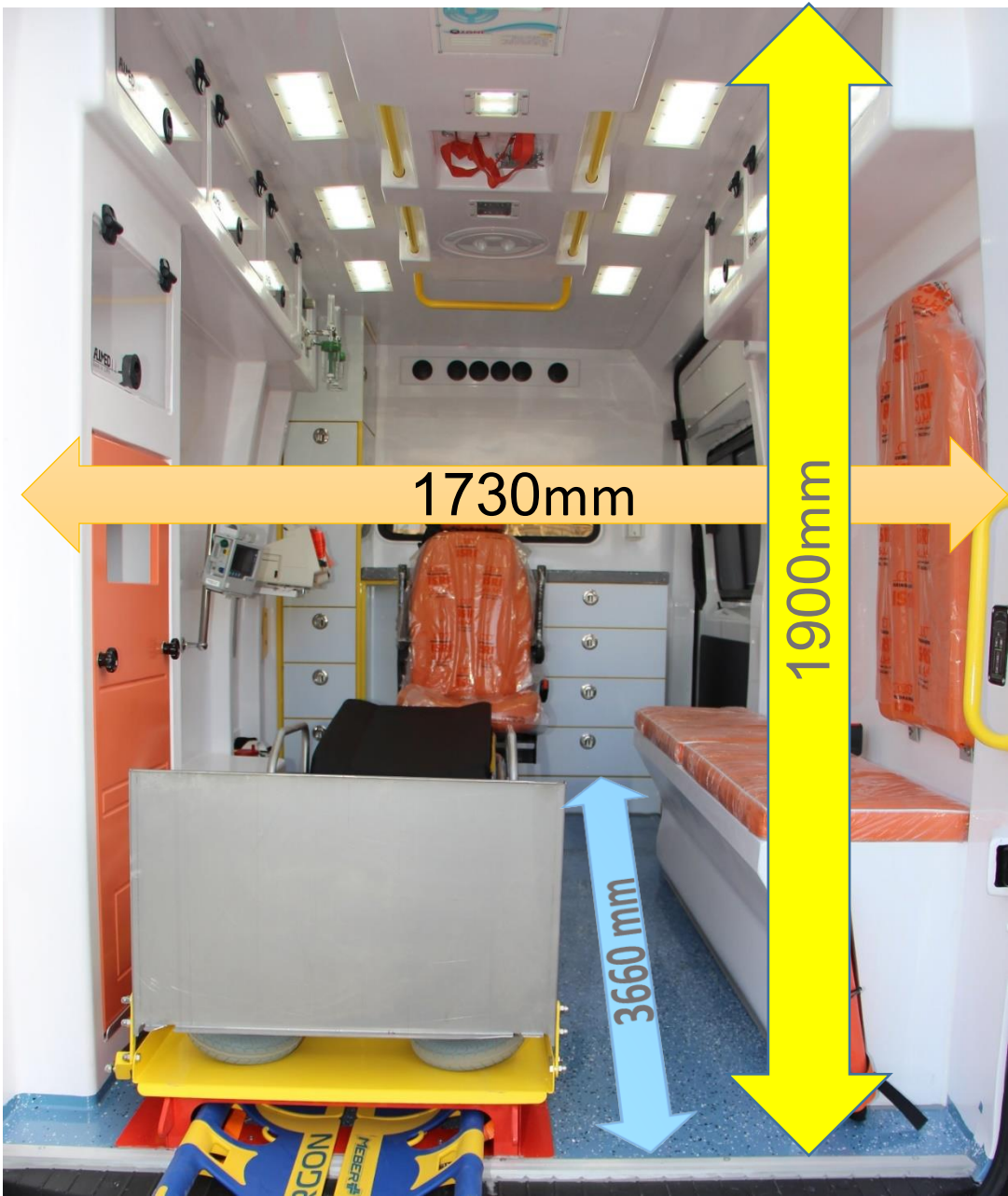

ابعاد کابین بیمار

طول کابین : ۳۶۶۰ میلیمتر

عرض کابین : ۱۷۳۰ میلیمتر

ارتفاع کابین : ۱۹۰۰ میلیمتر

تربیم داخلی



مشخصات تریم

- پوشش کامل کابین عقب با دیواره های کامپوزیتی با رویه (ژلکوت) آنتی باکتریال ، مقاوم در برابر اشعه ماورابنفش ، مواد ضد عفونی کننده
- عایق بندی کامل کابین بیمار با عایقهای برودتی ، حرارتی و اکوستیک مقاوم در برابر شعله پذیری به منظور ارتقا کارایی سیستم تهویه و کاهش میزان سر و صدای داخل کابین بیمار
- استراکچر فلزی پشت کاورها به منظور امکان اتصال ایمن و پایدار هولدرهای تجهیزات پزشکی مانند دستگاه دیفیبریلاتور، مانیتورینگ، ساکشن و...



تریم داخلی



مشخصات تریم

- **بورد نصب تجهیزات پزشکی الکترونیکی**
با قابلیت نصب کلیه تجهیزات پزشکی تیپ B شامل انواع دستگاه
های الکتروشوک، ونتیلاتور، ساکشن اورژانس، پمپ تزریق و .



تریم داخلی



HYUNDAI H350 AMBULANCE



- مشخصات تریم - قفسه بندی اصلی
- کشو و قفسه های قفل شونده با قفل های از جنس استیل ضد زنگ دریایی (Marine Stainless Steel) ، جانمایی شده در پشت پارتیشن به منظور حفظ مرکز ثقل خودرو و توزیع متعادل وزن بارگذاری شده از جنس ورقهای پلیمری با قابلیت شستشو و ضد عفونی با مواد ضد عفونی کننده و شوینده ها
 - مقاوم در برای رطوبت



تریم داخلی



www.allmed.ir
info@allmed.ir
+982156807410-12
@allmedco





Over Head Compartment

Over Head Compartment
شفاف (transparent) قفل شونده به منظور افزایش
سرعت دسترسی به تجهیزات مورد نظر و لوله‌های خود
نگهدارنده بدون نیاز به جک‌های بالابر در دو طرف کابین



تریم داخلی





سقف کابین بیمار

- جانمایی نگهدارنده های سرم درموقعیت بالا و پایین بدن بیمار به منظور امکان تزریق در نواحی مختلف بدن
- دستگیره سقفی سرتاسری به منظور ارتقا ایمنی کادر درمان در زمان ارائه خدمات درمانی در آمبولانس در حال حرکت
- جانمایی روشنایی ، نورهای رگ گیری و سیستم ضدعفونی کننده با استفاده از گاز اوزون

تربیم داخلی





نیمکت همراه :

در امتداد برانکارد
دارای پشتی و نشیمن برای دو سرنشین
مجهز به کمربند ایمنی دو نقطه ای
فضای انبارش تجهیزات در زیر نشیمن ها
با روکش چرمی قابل شستشو و ضد عفونی
فضای جانبایی لانگ بک بورد



صندلی پرستار :

- در موقعیت بالای سر برانکارد با قابلیت چرخش، مجهز به پشت سری و آرم رست
- مجهز به کمربند ایمنی سه نقطه ای

تیم داخلی





سیستم مرکزی اکسیژن آمبولانس

- هولدر حمل دو کپسول اکسیژن ۱۰ لیتری متصل به استراکچر فلزی آمبولانس
- بورد کنترل سیستم اکسیژن برند بوسکارول ایتالیا نصب شده در کنار صندلی پرستار
- مجهز به شیر انتخاب کپسول و نشانگر فشار کپسول ها
- قابلیت تعویض سریع کپسول ها از درب مستقل سمت چپ (ویژه خودرو ۵ درب)
- دو عدد آلت اکسیژن در موقعیت سر بیمار
- یک آلت در بالای نیمکت جهت خدمات دهی به بیماران سرپایی

تربیم داخلی





کف سازی کابین بیمار

- کف سازی با استفاده از ورقهای پلاستی و وود واتر پروف
- کف به صورت یکپارچه با روکش رزین پلیمری
- مقاوم در برابر مواد شوینده و ضد عفونی کننده های قوی
- بدون درز با دیواره های جانبی

تریم داخلی



سیستم الکترونیکی کابین بیمار و کنترل

- درخت سیم و سیستم الکترونیکی مستقل کابین آمبولانس
- پنل کنرل کابین بیمار (۳ پنل کنترل در کابین بیمار و راننده)
- سیستم روشنایی
- سیستم ضد عفونی کننده با استفاده از گاز ازون



سیستم الکترونیکی کابین بیمار و کنترلرها





سیستم الکتریکی کابین بیمار

- سیستم مستقل الکتریکی کابین بیمار که به صورت مستقل از سیستم برق خودرو عمل می نماید مجهز به خروجی های ۱۲ ولت و ۲۲۰ ولت جهت شارژ و استفاده از تجهیزات پزشکی می باشد.
- لامپ های روشنایی کابین بیمار با طراحی منحصر به فرد با قابلیت تنظیم شدت تابش نور ، در امتداد سقف خودرو روشنایی مورد نیاز برای انجام عملیات درمانی را فراهم می آورند.
- کلیه مدار ها مجهز به محافظ مدار (فیوز) می باشد. جعبه فیوز اصلی که در دسترس می باشد دارای چراغ هشدار معیوب بودن فیوز

سیستم الکترونیکی کابین بیمار و کنترلرها



HYUNDAI H350 AMBULANCE




سیستم الکترونیکی کابین بیمار و کنترلرها - کنترل پنل سیستم الکترونیکی



www.allmed.ir
info@allmed.ir
[+982156807410-12](tel:+982156807410-12)
[@allmedco](https://www.instagram.com/allmedco)



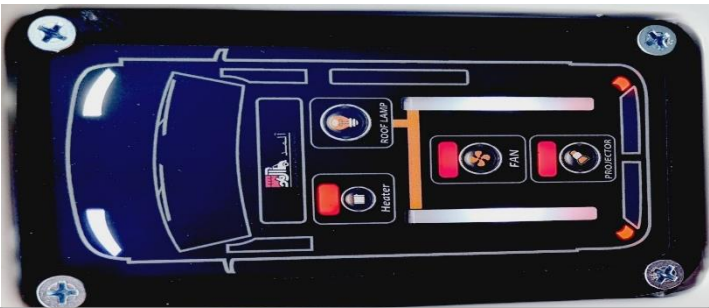

پنل دوم کابین بیمار

- نصب شده در ورودی کابین بیمار از درب عقب خودرو
- امکان کنترل ۴ عملگر اصلی در زمان انتقال بیمار به خودرو از درب عقب
- نشانگر وضعیت عملگرهای فعال



پنل اصلی کابین بیمار

- پنل تاچ ۷ اینچی
- نصب شده در موقعیت بالای صندلی پرستار
- اعلام وضعیت فیوزهای معیوب
- کنترل تمام عملگرهای الکترونیکی کابین بیمار
- امکان ارتباط صوتی با کابین راننده با فشردن یک دکمه
- کلیدهای اضطراری در صورت آسیب دیدگی صفحه تاچ
- نشانگر باز بودن دربهای عقب
- نشانگر وضعیت عملگرها در لحظه به صورت گرافیکی



پنل کابین راننده

- قطع و وصل برق کابین عقب
- کنترل ۴ عملگر اصلی از کابین راننده
- امکان ارتباط صوتی با پرستار
- هشدار بصری باز بودن درب های کابین بیمار

کنترل پنل سیستم الکترونیکی

- دارای سه اینترفیس مجزا
 - I. پنل کابین راننده
 - II. پنل اصلی کابین بیمار
 - III. پنل نصب شده در ورودی درب عقب کابین بیمار
- مجهز به برد پاور و جعبه فیوز مجزا نصب شده در کابین راننده





سیستم ضد عفونی کابین بیمار ALO3

- سیستم ضد عفونی کابین بیمار با استفاده از گاز اوزن و بدون نیاز به مواد ضد عفونی و شارژ مجدد
- نصب شده بر روی سقف آمبولانس با قابلیت تولید ۶۰ مترمکعب (سه برابر حجم کابین بیمار) گاز اوزون در ۱۵ دقیقه
- نفوذ در تمام نواحی غیر قابل دسترس کابین بیمار به واسطه فشار حجمی
- دارای سنسور تشخیص موجود زنده (HUMAN DETECTOR) به منظور حفظ سلامت کادر درمان
- قابلیت کنترل از پنل کنترل اصلی کابین بیمار
- ضد عفونی در ۴ مرحله از محیط با آلودگی کم تا به شدت آلوده
- جزو روشهای موثر مورد تایید سازمان بهداشت جهانی WHO برای ضد عفونی محیطهای آلوده به ویروس کووید ۱۹
- قابلیت از بین بردن ۹۹ درصد میکرو ارگانیسم ها





Eberspächer Kalori

سیستم سرمایش

- سیستم سرمایش کاملاً مجزا کابین بیمار
- قابلیت سرمایش بالا ویژه مناطق گرمسیری
- برند Kalori & Eberspacher (فرانسه/آلمان)
- قابل کنترل از روی پنل اصل کابین بیمار
- امکان تنظیم دمای دلخواه

سیستم گرمایش

- سیستم گرمایش کاملاً مجزا کابین بیمار
- قابلیت گرمایش بالا مناسب مناطق سردسیری
- برند Kalori & Eberspacher (فرانسه/آلمان)
- قابل کنترل از روی پنل اصل کابین بیمار
- امکان تنظیم دمای دلخواه

سیستم تهویه

- فن قدرتمند تهویه نصب شده روی سقف خودرو
- دارای مود دمشی و مکشی
- قابلیت تعویض هوای داخل کابین بیمار ۱۰۰ بار در ساعت
- برند Kalori eberspacher (فرانسه/آلمان)
- قابل کنترل از روی پنلهای کنترل آمبولانس

سیستم تهویه / سرمایش / گرمایش



www.allmed.ir
info@allmed.ir
+982156807410-12
@allmedco



HYUNDAI H350 AMBULANCE



آلارم، تجهیزات هشداردهنده و علائم ظاهری آمبولانس

- چراغ خطی با لامپ های Power LED
- چراغ خطی مینی سوپر لایت LED
- چراغ های کنسولی چشمک زن در اطراف خودرو / ۴ عدد
- چراغهای گریل لایت SMD جلو پنجره ای
- آژیر با صدای قوی و بلندگو مدل PA400 شرکت نورندا
- برجسب های شبرنگ نوشته های آمبولانس در اطراف

خودرو برند orafel آلمان

- طراحی زیبا
- امکان شناسایی آمبولانس برای رانندگان دیگر از فاصله

دور



آلارم، تجهیزات هشداردهنده و علائم ظاهری آمبولانس

www.allmed.ir
info@allmed.ir
+982156807410-12
@allmedco



HYUNDAI H350 AMBULANCE



تجهيزات پزشکی

شرکت آلمد نماینده انحصاری شرکت بوسکارول ایتالیا و شرکت مبر ایتالیا در ایران
وارد کننده انواع دستگاه های ساکشن الکتریکی، دستگاه دیفیبریلاتور
اتوماتیک AED و انواع برانکار آمبولانس



تجهيزات پزشکی

www.allmed.ir
info@allmed.ir
+982156807410-12
@allmedco



Save a LIFE 