

MERCEDES BENZ SPRINTER 316 AMBULANCE

ALMED
SAVE A LIFE

آمبولانس بنز اسپرینتر ۳۱۶



Mercedes-Benz

PRO-Z
KIT

TYPE-B



دارای استاندارد ملی ۴۳۷۴



ISIRI4374
EN1789

+982533343976
www.allmed.ir
@allmedco

MERCEDES BENZ SPRINTER 316 AMBULANCE

ALLMED
SAVE A LIFE



احساسی متفاوت از کیفیت و ایمنی در سطح روز دنیا

MEBERT+
IN CASE OF EMERGENCY

BOSCAROL
Emergency Medical Systems

آلمد
شرکت راک پیشران فلات

VAN & CAR

MEISAMI
WE MAKE IT EASY


Mercedes-Benz


ISIRI4374
EN1789

+982533343976
www.allmed.ir
@allmedco

MERCEDES BENZ SPRINTER 316 AMBULANCE

ALLMED
SAVE A LIFE




خودرویی در بالاترین سطح تکنولوژی اروپا

امکانات رفاهی و ایمنی مدرن

طراحی به روز کابین بیمار

تجهیزات پزشکی ویژه آمبولانس

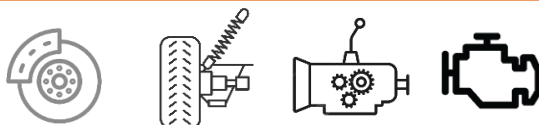

مشخصات فنی خودرو



مشخصات آمبولانس



تريم داخلی و جانمايی تجهيزات



سیستم الکترونیکی کابین بیمار و کنترلرها



سیستم تهویه / سرمایش / گرمایش



آلارم ، تجهيزات هشدار دهنده و علائم ظاهري آمبولانس



تجهيزات پزشکی



فهرست



MERCEDES BENZ SPRINTER 316 AMBULANCE

ALLMED
SAVE A LIFE



موتور

حجم موتور: 2.1 L

نوع و مدل موتور: دیزل

حداکثر قدرت: 163 HP

متوسط مصرف سوخت: 7.2

L/100 km

سطح استاندارد آلایندگی: یورو 6



ترمز

ترمز جلو:

دیسکی تهویه شونده

ترمز عقب:

دیسکی

ABS & EBD

(هر ۴ چرخ دیسکی)

مشخصات فنی خودرو - موتور / ترمز



MERCEDES BENZ SPRINTER 316 AMBULANCE

ALLMED
SAVE A LIFE

سیستم تعلیق

- ۱- سیستم تعلیق تمام بادی مرسدس (Full air suspension)
در مدل تک دیفرانسیل
- ۲- سیستم تعلیق جلو مکفرسون / عقب فنر تخت پارابولیک
در مدل دو دیفرانسیل

دیفرانسیل در دو مدل

- ۱- دیفرانسیل عقب (تک دیفرانسیل) RWD
- ۲- دو دیفرانسیل (چهار چرخ متحرک) AWD

گیربکس

گیربکس:

- دستی 6 سرعته (در مدل تک دیفرانسیل)
- اتومات 6 سرعته (در مدل دو دیفرانسیل)



ALL-WHEEL DRIVE ➤



REAR WHEEL DRIVE ➤

مشخصات فنی خودرو - سیستم انتقال قدرت و تعلیق

MERCEDES BENZ SPRINTER 316 AMBULANCE

ALLMED
SAVE A LIFE



ایمنی :

ایر بگ راننده و سرنشین جلو

هشدار دهنده رانندگی بین خطوط

قفل مرکزی

روشنایی روز (DAY LIGHT)

آینه نقطه کور جانبی



مشخصات فنی خودرو - امکانات ایمنی و رفاهی

MEBERT
IN CASE OF EMERGENCY

BOSCAROL
Emergency Medical Systems

آلمد
شرکت راک پیشران فلات

VAN

MEISAMI
WE MAKE IT EASY


Mercedes-Benz


ISIRI4374
EN1789

+982533343976
www.allmed.ir
@allmedco



MERCEDES BENZ SPRINTER 316 AMBULANCE

ALLMED
SAVE A LIFE

امکانات رفاهی

استارت بدون سویچ (keyless starter)

دوربین دنده عقب

مانیتور و سیستم صوتی

فرمان مولتی فانکشن

آینه های برقی

نمایشگر پشت آمپر و دیاگ اینترنال

.....



مشخصات فنی خودرو - امکانات ایمنی و رفاهی

MEBERT
IN CASE OF EMERGENCY

BOSCAROL
Emergency & Medical Systems

آلمد
شرکت راک پیشران فلات

VAN
VAN

MEISAMI
WE MAKE IT EASY


Mercedes-Benz



ISIRI4374
EN1789

+982533343976
www.allmed.ir
@allmedco



MERCEDES BENZ SPRINTER 316 AMBULANCE

ALMED
SAVE A LIFE

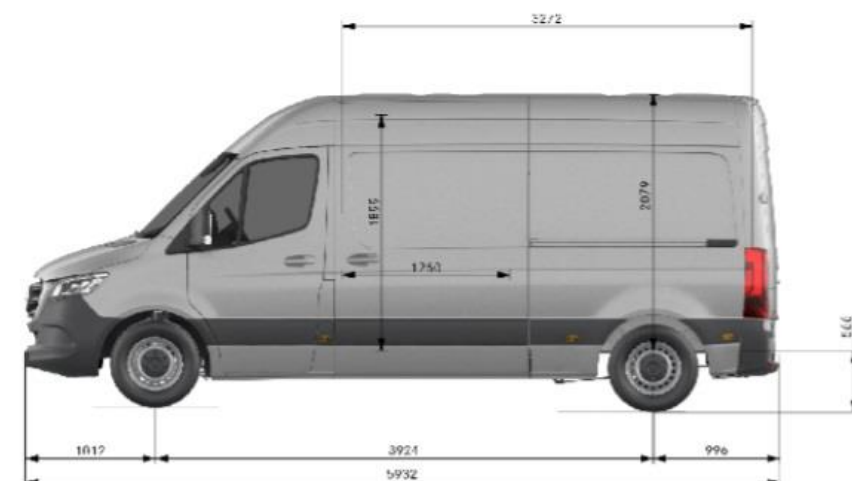

ابعاد خودرو

طول خودرو: ۵۹۳۲ میلیمتر

عرض خودرو: ۲۳۴۵ میلیمتر

ارتفاع خودرو: ۲۶۳۸ میلیمتر

ارتفاع آمبولانس: ۲۸۳۸ میلیمتر

(ارتفاع پس از اضافه کردن چراغ خطی، سیستم تهویه و کولر
روی سقف خودرو)

مشخصات اتاق (L2H2)

فاصله بین دو محور: بلند (long wheel base)

سقف بلند (High roof)

در دو مدل:

TWO REAR DOOR (۵ درب) دارای دو درب کشویی

ONE REAR DOOR (۴درب) دارای یک درب کشویی

طراحی با ارگونومی مناسب کابین راننده

مشخصات فنی خودرو – ابعاد خودرو



MERCEDES BENZ SPRINTER 316 AMBULANCE

ALLMED
SAVE A LIFE

PRO-Z KIT



کانورژن PRO -Z TYPE B

مشخصات آمبولانس (کانورژن آمبولانس)



MEBERT+
IN CASE OF EMERGENCY

BOSCAROL
Emergency & Medical Systems

آلمد
شرکت راک پیشران فلات

VAN & CAR

MEISAMI
WE MAKE IT EASY


Mercedes-Benz



ISIRI4374
EN1789

+982533343976
www.allmed.ir
@allmedco



MERCEDES BENZ SPRINTER 316 AMBULANCE

ALLMED
SAVE A LIFE

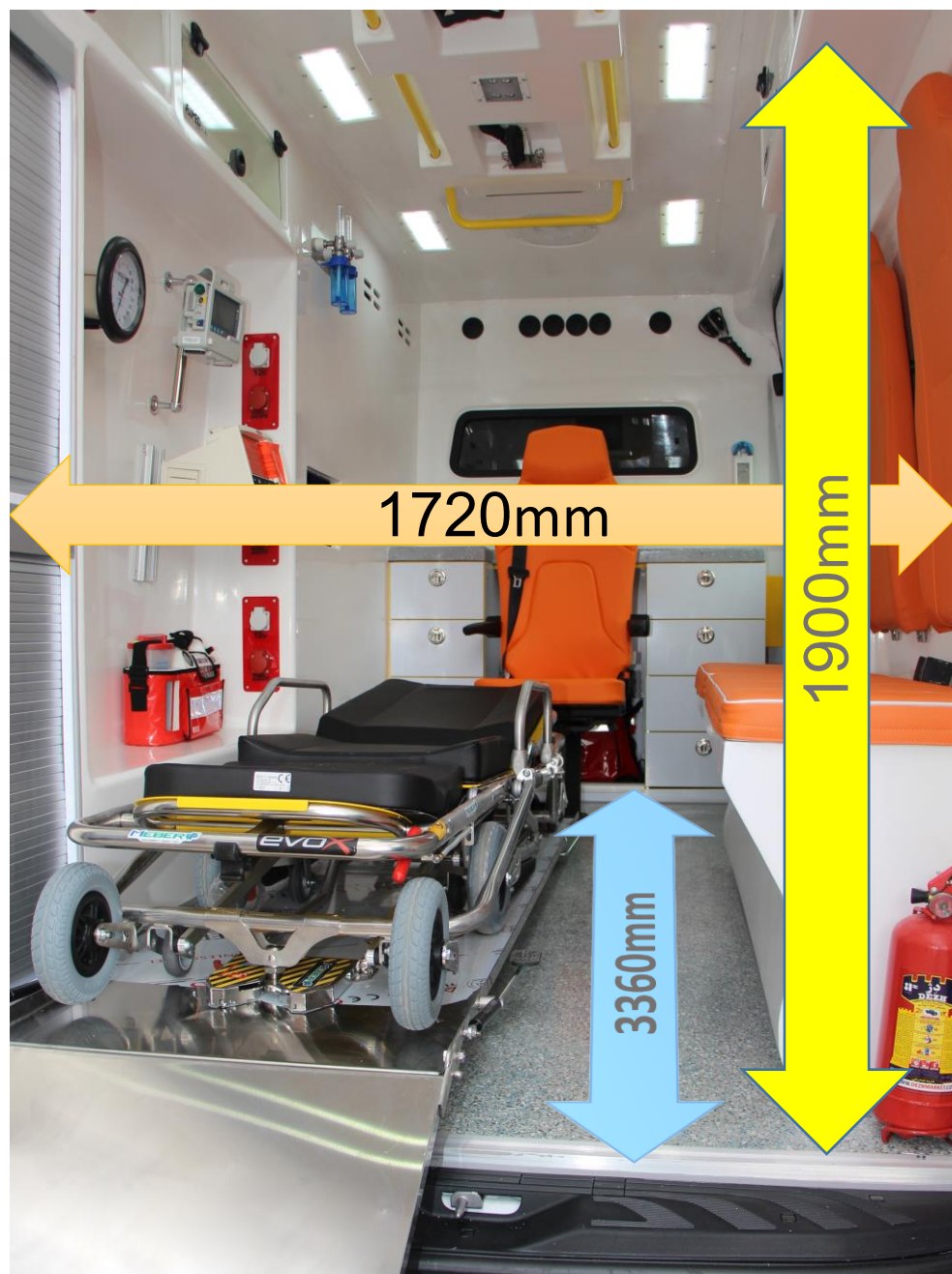

ابعاد کابین بیمار

طول کابین : ۳۳۶۰ میلیمتر

عرض کابین : ۱۷۲۰ میلیمتر

ارتفاع کابین : ۱۹۰۰ میلیمتر

PRO-Z KIT

تریم داخلی



MERCEDES BENZ SPRINTER 316 AMBULANCE

ALLMED
SAVE A LIFE

مشخصات تریم

- پوشش کامل کابین عقب با دیواره های کامپوزیتی با رویه (ژلکوت) آنتی باکتریال ، مقاوم در برابر اشعه ماورابنفش ، مواد ضدعفونی کننده
- عایق بندی کامل کابین بیمار با عایقهای برودتی ، حرارتی و اکوستیک مقاوم در برابر شعله پذیری به منظور ارتقا کارایی سیستم تهویه و کاهش میزان سر و صدای داخل کابین بیمار
- استراکچر فلزی پشت کاورها به منظور امکان اتصال ایمن و پایدار هولدرهای تجهیزات پزشکی مانند دستگاه دیفیبریلاتور، مانیتورینگ، ساکشن و ...



PRO-Z KIT



تریم داخلی



MERCEDES BENZ SPRINTER 316 AMBULANCE

ALLMED
SAVE A LIFE

مشخصات تریم

- مورد نصب تجهیزات پزشکی الکترونیکی با قابلیت نصب کلیه تجهیزات پزشکی تیپ B شامل انواع دستگاه های الکتروشوک، ونتیلاتور، ساکشن اورژانس، پمپ تزریق و .



PRO-Z KIT


تریم داخلی

MERCEDES BENZ SPRINTER 316 AMBULANCE

ALLMED
SAVE A LIFE

مشخصات تریم - قفسه بندی اصلی

- کشو و قفسه های قفل شونده با قفل های از جنس استیل ضد زنگ دریایی (Marine Stainless Steel) ، جانمایی شده در پشت پارتیشن به منظور حفظ مرکز ثقل خودرو و توزیع متعادل وزن بارگذاری شده از جنس ورقهای پلیمری با قابلیت شستشو و ضد عفونی با مواد ضد عفونی کننده و شوینده ها
- مقاوم در برابر رطوبت

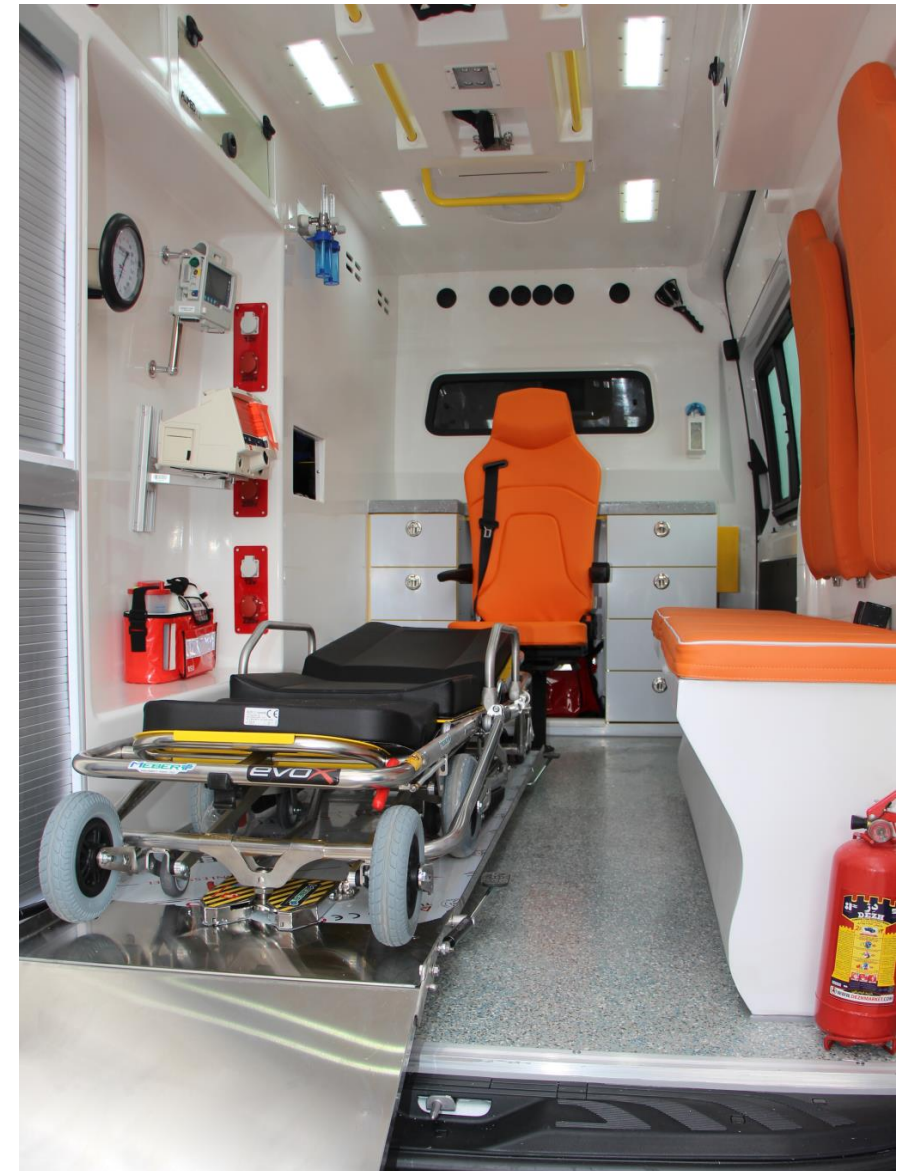

PRO-Z KIT

تریم داخلی



MERCEDES BENZ SPRINTER 316 AMBULANCE

ALLMED
SAVE A LIFE



مشخصات تریم - درب کشویی دوم (سمت راننده) - خودرو بنز ۵ درب

- جانمایی کپسول های اکسیژن و تجهیزات امدادی مانند چیر استرچر، اسکوپ استرچر، تشک خلا و ..
- افزایش فضای کاری کابین بیمار برای کادر درمان به منظور افزایش سهولت استفاده از تجهیزات پزشکی ویژه مانند پمپهای تزریق و....



PRO-Z KIT

تریم داخلی

MERCEDES BENZ SPRINTER 316 AMBULANCE

ALLMED
SAVE A LIFE



Over Head Compartment

Over Head Compartment با دربهای شفاف (transparent) قفل شونده به منظور افزایش سرعت دسترسی به تجهیزات مورد نظر و لوله‌های خود نگهدارنده بدون نیاز به جک‌های بالابر در دو طرف کابین



PRO-Z KIT

تریم داخلی



سقف کابین بیمار

- جانمایی نگهدارنده های سرم درموقعیت بالا و پایین بدن بیمار به منظور امکان تزریق در نواحی مختلف بدن
- دستگیره سقفی سرتاسری به منظور ارتقا ایمنی کادر درمان در زمان ارائه خدمات درمانی در آمبولانس در حال حرکت
- جانمایی روشنایی ، نورهای رگ گیری و سیستم ضدعفونی کننده با استفاده از گاز اوزون

PRO-Z KIT

تیم داخلی



MERCEDES BENZ SPRINTER 316 AMBULANCE

ALLMED
SAVE A LIFE



نیمکت همراه :

در امتداد برانکارد
دارای پشتی و نشیمن برای دو سرنشین
مجهز به کمربند ایمنی دو نقطه ای
فضای انبارش تجهیزات در زیر نشیمن ها
با روکش چرمی قابل شستشو و ضد عفونی



صندلی پرستار :

- در موقعیت بالای سر برانکارد با قابلیت چرخش، مجهز به پشت سری و آرم رست
- مجهز به کمربند ایمنی سه نقطه ای
- با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه حول محور پایه صندلی
- برند FASP ساخت ایتالیا

PRO-Z KIT

تربیم داخلی



MERCEDES BENZ SPRINTER 316 AMBULANCE

ALLMED
SAVE A LIFE



سیستم مرکزی اکسیژن آمبولانس

- هولدر حمل دو کپسول اکسیژن ۱۰ لیتری متصل به استراکچر فلزی آمبولانس
- بورد کنترل سیستم اکسیژن برند بوسکارول ایتالیا نصب شده در کنار صندلی پرستار
- مجهز به شیر انتخاب کپسول و نشانگر فشار کپسول ها
- قابلیت تعویض سریع کپسول ها از درب مستقل سمت چپ (ویژه خودرو ۵ درب)
- دو عدد آلت اکسیژن در موقعیت سر بیمار
- یک آلت در بالای نیمکت جهت خدمات دهی به بیماران سرپایی

PRO-Z KIT

تیم داخلی



MERCEDES BENZ SPRINTER 316 AMBULANCE

ALLMED
SAVE A LIFE



کف سازی کابین بیمار

- کف سازی با استفاده از ورقهای پلاستی و وود واتر پروف
- کف به صورت یکپارچه با روکش رزین پلیمری
- مقاوم در برابر مواد شوینده و ضد عفونی کننده های قوی
- بدون درز با دیواره های جانبی

PRO-Z KIT

تریم داخلی

MEBERT+
IN CASE OF EMERGENCY

BOSCAROL
Emergency & Medical Systems

آلمد
شرکت راک پیشران فلات

VAN & CAR

MEISAMI
WE MAKE IT EASY


Mercedes-Benz


ISIRI 4374
EN1789

+982533343976
www.allmed.ir
@allmedco



MERCEDES BENZ SPRINTER 316 AMBULANCE

ALLMED
SAVE A LIFE

سیستم الکترونیکی کابین بیمار و کنترل

- درخت سیم و سیستم الکترونیکی مستقل کابین آمبولانس
- پنل کنترل کابین بیمار (۳ پنل کنترل در کابین بیمار و راننده)
- سیستم روشنایی
- سیستم ضد عفونی کننده با استفاده از گاز ازون



PRO-Z KIT

سیستم الکترونیکی کابین بیمار و کنترلرها



سیستم الکترونیکی کابین بیمار


- سیستم مستقل الکتریکی کابین بیمار که به صورت مستقل از سیستم برق خودرو عمل می نماید مجهز به خروجی های ۱۲ ولت و ۲۲۰ ولت جهت شارژ و استفاده از تجهیزات پزشکی می باشد.
- لامپ های روشنایی کابین بیمار با طراحی منحصر به فرد با قابلیت تنظیم شدت تابش نور ، در امتداد سقف خودرو روشنایی مورد نیاز برای انجام عملیات درمانی را فراهم می آورند.
- کلیه مدار ها مجهز به محافظ مدار (فیوز) می باشد. جعبه فیوز اصلی که در دسترس می باشد دارای چراغ هشدار معیوب بودن فیوز

PRO-Z KIT

سیستم الکترونیکی کابین بیمار و کنترلرها

MERCEDES BENZ SPRINTER 316 AMBULANCE

ALLMED
SAVE A LIFE

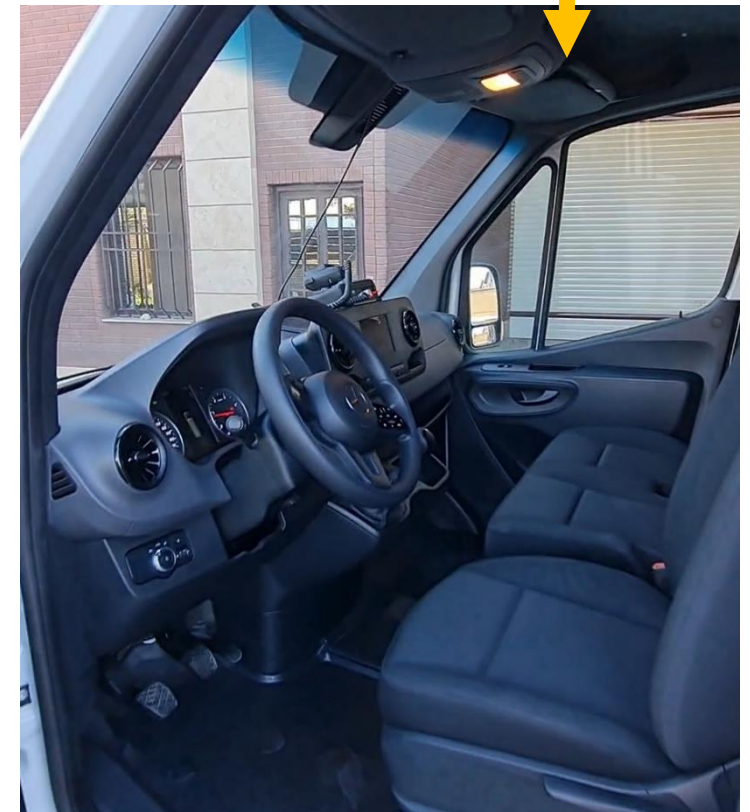

PRO-Z KIT

سیستم الکترونیکی کابین بیمار و کنترلرها - کنترل پنل سیستم الکترونیکی

MEBERT
IN CASE OF EMERGENCY

BOSCAROL
Emergency & Medical Systems

آلمد
شرکت راک پیشران فلات

VAN
AR

MELISAMI
WE MAKE IT EASY

Mercedes-Benz


ISIRI4374
EN1789

+982533343976
www.allmed.ir
@allmedco



MERCEDES BENZ SPRINTER 316 AMBULANCE

ALLMED
SAVE A LIFE

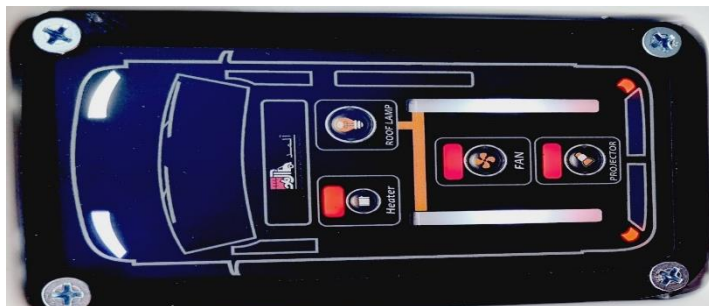

پنل دوم کابین بیمار

- نصب شده در ورودی کابین بیمار از درب عقب خودرو
- امکان کنترل ۴ عملگر اصلی در زمان انتقال بیمار به خودرو از درب عقب
- نشانگر وضعیت عملگرهای فعال



پنل اصلی کابین بیمار

- پنل تاچ ۹ اینچی
- نصب شده در موقعیت بالای صندلی پرستار
- اعلام وضعیت فیوزهای معیوب
- کنترل تمام عملگرهای الکترونیکی کابین بیمار
- امکان ارتباط صوتی با کابین راننده با فشردن یک دکمه
- کلیدهای اضطراری در صورت آسیب دیدگی صفحه تاچ
- نشانگر باز بودن دربهای عقب
- نشانگر وضعیت عملگرها در لحظه به صورت گرافیکی



پنل کابین راننده

- قطع و وصل برق کابین عقب
- کنترل ۴ عملگر اصلی از کابین راننده
- امکان ارتباط صوتی با پرستار
- هشدار بصری باز بودن درب های کابین بیمار

کنترل پنل سیستم الکترونیکی

- دارای سه اینترفیس مجزا
 - I. پنل کابین راننده
 - II. پنل اصلی کابین بیمار
 - III. پنل نصب شده در ورودی درب عقب کابین بیمار
- مجهز به برد پاور و جعبه فیوز مجزا نصب شده در کابین راننده

PRO-Z KIT

سیستم الکترونیکی کابین بیمار و کنترلرها - کنترل پنل سیستم الکترونیکی



سیستم ضد عفونی کابین بیمار ALO3

- سیستم ضد عفونی کابین بیمار با استفاده از گاز اوزن و بدون نیاز به مواد ضد عفونی و شارژ مجدد
- نصب شده بر روی سقف آمبولانس با قابلیت تولید ۶۰ مترمکعب (سه برابر حجم کابین بیمار) گاز اوزون در ۱۵ دقیقه
- نفوذ در تمام نواحی غیر قابل دسترس کابین بیمار به واسطه فشار حجمی
- دارای سنسور تشخیص موجود زنده (HUMAN DETECTOR) به منظور حفظ سلامت کادر درمان
- قابلیت کنترل از پنل کنترل اصلی کابین بیمار
- ضد عفونی در ۴ مرحله از محیط با آلودگی کم تا به شدت آلوده
- جزو روشهای موثر مورد تایید سازمان بهداشت جهانی WHO برای ضد عفونی محیطهای آلوده به ویروس کووید ۱۹
- قابلیت از بین بردن ۹۹ درصد میکرو ارگانیسم ها

PRO-Z KIT

سیستم الکترونیکی کابین بیمار و کنترلرها - سیستم ضد عفونی ALO3

MERCEDES BENZ SPRINTER 316 AMBULANCE

ALLMED
SAVE A LIFE



Eberspächer Kalori
PRO-Z KIT

سیستم تهویه / سرمایش / گرمایش

سیستم سرمایش

- سیستم سرمایش کاملاً مجزا کابین بیمار
- قابلیت سرمایش بالا ویژه مناطق گرمسیری
- برند Kalori & Eberspacher (فرانسه/آلمان)
- قابل کنترل از روی پنل اصل کابین بیمار
- امکان تنظیم دمای دلخواه

سیستم گرمایش

- سیستم گرمایش کاملاً مجزا کابین بیمار
- قابلیت گرمایش بالا مناسب مناطق سردسیری
- برند Kalori & Eberspacher (فرانسه/آلمان)
- قابل کنترل از روی پنل اصل کابین بیمار
- امکان تنظیم دمای دلخواه

سیستم تهویه

- فن قدرتمند تهویه نصب شده روی سقف خودرو
- دارای مود دمشی و مکشی
- قابلیت تعویض هوای داخل کابین بیمار ۱۰۰ بار در ساعت
- برند Kalori eberspacher (فرانسه/آلمان)
- قابل کنترل از روی پنلهای کنترل آمبولانس

MERCEDES BENZ SPRINTER 316 AMBULANCE

ALLMED
SAVE A LIFE



آلارم، تجهیزات هشداردهنده و علائم ظاهری آمبولانس

- چراغ خطی با لامپ های Power LED
- چراغ خطی مینی سوپر لایت LED
- چراغ های کنسولی چشمک زن در اطراف خودرو/ ۴ عدد
- چراغهای گریل لایت SMD جلو پنجره ای
- آژیر با صدای قوی و بلندگو مدل PA400 شرکت نورندا
- برچسب های شبرنگ نوشته های آمبولانس در اطراف
- خودرو برند orafel آلمان
- طراحی زیبا
- امکان شناسایی آمبولانس برای رانندگان دیگر از فاصله

دور

PRO-Z KIT

آلارم، تجهیزات هشداردهنده و علائم ظاهری آمبولانس

MEBERT+
IN CASE OF EMERGENCY

BOSCAROL
Emergency & Medical Systems

آلمد
شرکت راک پیشران فلات

VAN & CAR

MEISAMI
WE MAKE IT EASY

Mercedes-Benz

ISIRI4374
EN1789

+982533343976
www.allmed.ir
@allmedco



MERCEDES BENZ SPRINTER 316 AMBULANCE

ALLMED
SAVE A LIFE

تجهيزات پزشکی

شرکت آلمد نماینده انحصاری شرکت بوسکارول ایتالیا و شرکت مبر ایتالیا در ایران
وارد کننده انواع دستگاه های ساکشن الکتریکی، دستگاه دیفیبریلاتور
اتوماتیک AED و انواع برانکار آمبولانس



PRO-Z KIT

تجهيزات پزشکی

MEBERT+
IN CASE OF EMERGENCY

BOSCAROL
Emergency & Medical Systems

آلمد
شرکت راک پیشران فلات

VAN & AR

MELISAMI
WE MAKE IT EASY


Mercedes-Benz


ISIRI4374
EN1789

+982533343976
www.allmed.ir
@allmedco



MERCEDES BENZ SPRINTER 316 AMBULANCE

ALLMED
SAVE A LIFE

Save a LIFE

MEBERT+
IN CASE OF EMERGENCY

BOSCAROL
Emergency & Medical Systems

آلمد
شرکت راک پیشران فلات

VANAR

MEISAMI
WE MAKE IT EASY


Mercedes-Benz


ISIRI4374
EN1789

+982533343976
www.allmed.ir
@allmedco

